


VARIOstar K50/T50

VARIOstar K50/T50

*Modern diş laboratuvarları için çok amaçlı piyasemen
- kalite ve fiyat açısından rakipsiz!*

VARIOstar el aleti

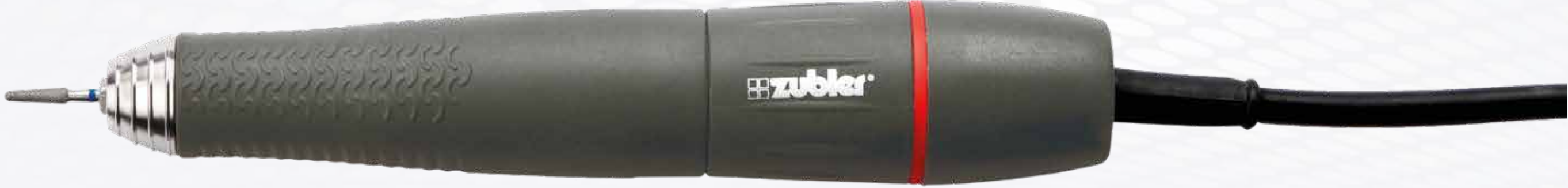

Performans

Tüm hız aralığında istikrarlı tork, basit kullanım ve iyi sağlam performans, bu el cihazını diş laboratuvarınız için güvenilir ve ayakları yere basan bir ortak haline getirir.

Optimum Hizmet

Uzun çalışma ömrü, minimum aksama süresi, düşük servis maliyetleri ve doğrudan servis üreticiden.

%100 uyumlu

emiş sisteminizle

Mevcut emiş sisteminizle %100 uyumluluğu garanti ediyoruz. Kullandığınız marka ne olursa olsun, yalnızca bağlayın ve temiz çalışın - el aleti tanıma çalışması garantilidir.

Ömür boyu garanti

Fırçasız el aleti - Ömür boyu armatür ve sargı garantisi,
Tüm sarf malzemeleri için 12 ay garanti.

Ergonomik

.VARIOstarstar el aleti kavraması kolaydır, rahattır ve yorulmadan çalışmayı destekler.

C2 serisi Profi/Master ile uyumlu

Kontrol üniteleri K50/T50ve VARIOstarstar el aleti her ikisi de C2 Profi/Master ile uyumludur.

Alman Yapımı

Zubler elektronikleri uzun ömür ve kaliteyle eş anlamlıdır. İyi ismimize güvenin.

Diz kontrolü veya masa üstü ünitesi

Uygun kontrol ünitenizi seçin.

- Diz kontrol ünitesi
- Masaüstü ünitesi

Hassasiyet, yenilik, uzun ömür ve yüksek kalite!

Bu terimler olağanüstü teknolojinin imajını tanımlar. Her gün bu terimleri Zubler'in itibarıyla eşanlamlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Kontrolörler (donanım ve yazılım) dahil olmak üzere mikro motorların geliştirilmesinde 35 yılı aşkın deneyim, yeni geliştirilen VARIOstar K50/T50 – çok amaçlı el aletinin temelini oluşturmaktadır. diş laboratuvarları için.

Güvenilirlik ve hizmet kolaylığı hafife alınmamalıdır. Orta ölçekli, sahibi tarafından yönetilen bir kuruluş olarak sürdürülebilir üretimin önemini anlıyoruz. Bu nedenle müşterilerimize doğrudan hızlı ve uygun fiyatlı hizmet sunuyoruz.



VARIOstar K50

Diz kontrol ünitesi

Yeni VARIOstarstar K50 diz kontrol ünitesi basit ve ergonomik bir çözüm sunuyor Laboratuvardaki günlük rutin için.



Dönüş hızı göstergesi

Okunması kolay ve sürekli.

Güvenlik anahtarı

Maksimum dönüş hızının kilidini açmak için..

Sağa dönüş (artı düğmesi)

Maksimum dönüş hızını artırma düğmesi..

Seyir kontrolü

Sola dönüş (eksi düğmesi)

Azaltmak için düğme maksimum dönüş hızı (çalışma güvenliği)
Sola ve Sağa dönüş maksimum 50.000 rpm'ye kadar.

Büyük diz hareketi minimum hız sıçramaları için

El Aleti Standı

dijital hız göstergeli (isteğe bağlı aksesuar)

Laboratuvardaki günlük rutininiz için kullanım kolaylığı

- Klavye aracılığıyla dönüş hızının basit girişi
- Piyasadaki tüm aspirasyon üniteleri için net başlatma sinyali
- Dizden kontrol cihazında okunması kolay, sürekli dönüş hızı göstergesi
- 50.000 rpm'ye kadar sola/sağa dönüş.
- Minimum hız sıçramaları için geniş diz hareketi

Elektronik kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde 35 yıldan fazla deneyim, inanılmaz sağlam performansın ve tüm hız aralığında istikrarlı torkun temelini oluşturur ve kolay kullanım.



VARIOstar T50


Masaüstü ünitesi

Çok amaçlı VARIOstarstar T50
3 farklı kontrol sistemiyle mevcuttur:

- Diz kontrolü
- Ayak kontrolü
- Ayak kumanda kolu



Diz kontrolü

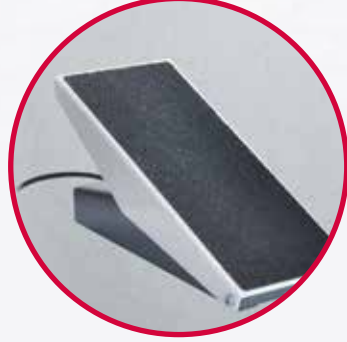

Ayak kontrolü



Ayak kumanda kolu




Hassasiyet, yenilik, uzun ömür ve yüksek kalite!

Yeni geliştirilen VARIOstarstar T50 masaüstü kontrol ünitesi
Laboratuvarındaki günlük rutin için basit ve ergonomik bir çözüm sunar.

- Hız düğmesi aracılığıyla dönüş hızının basit girişi
- Piyasadaki tüm aspirasyon üniteleri için net başlatma sinyali
- Masa üstü kontrol ünitesinde okunması kolay, sürekli değişken dönüş hızı göstergesi
- 50.000 rpm'ye kadar sola/sağa dönüş
- Hız kontrolü / hız sabitleyici
- Serbestçe seçilebilir, ulaşılabilir maksimum hız, güvenlik anahtarı aracılığıyla programlanabilir
- Kompakt yeni tasarlanmış kontrol ünitesi

Çok amaçlı piyasemen sistemi – kalite
ve fiyat açısından rakipsiz!

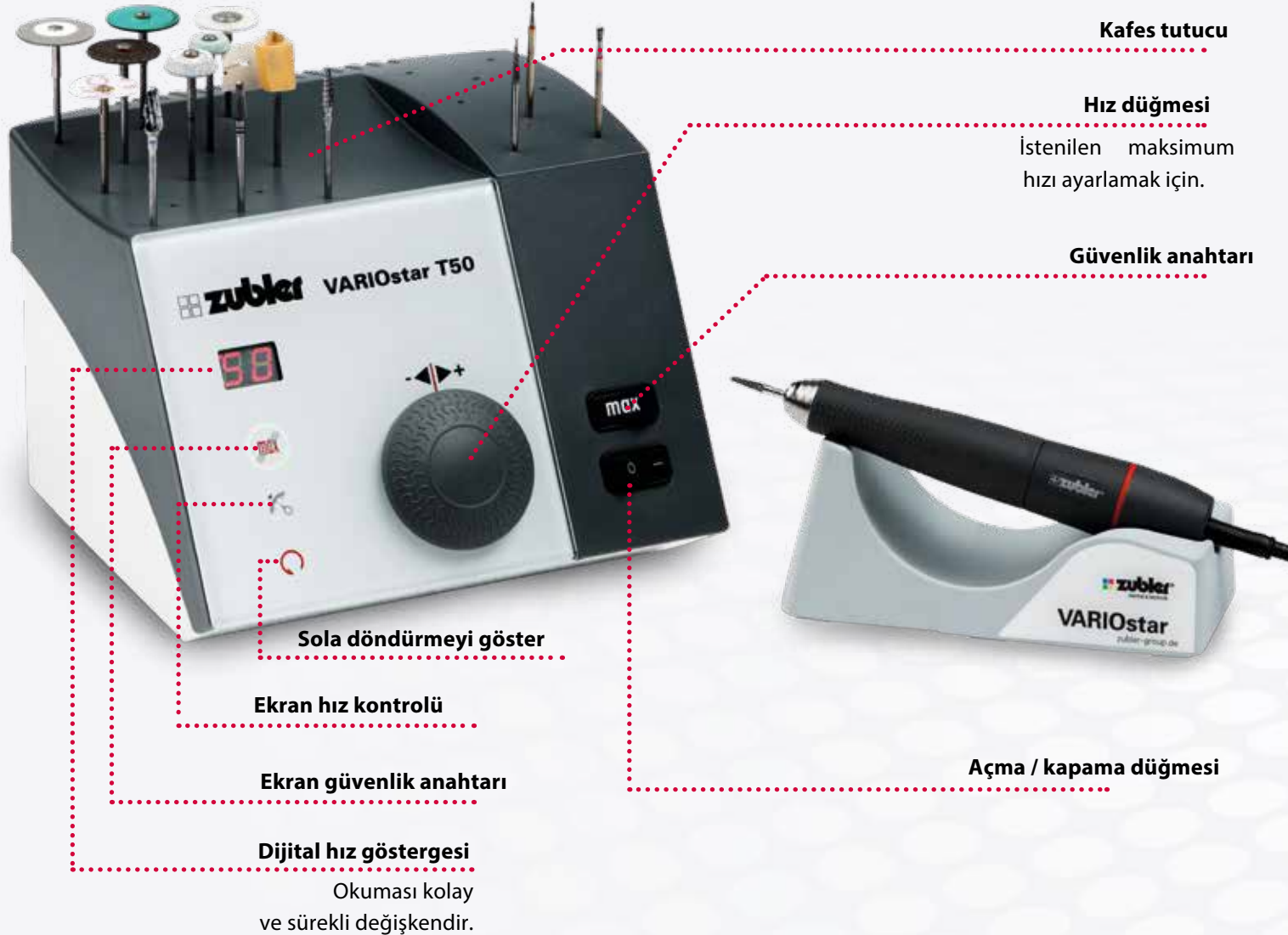



Diz pedalı
(sağ veya sol tarafa monte edilebilir)

Büyük diz hareketi
minimum hız sıçramaları için,

Sistem Varyantları:

804 - 3112 **VARIOstar K50**
Diz kontrol ünitesi 220 V - 240 V

804 - 3111 **VARIOstar K50**
Diz kontrol ünitesi 115 V

İçerir:

804 - 3012 Diz kontrol ünitesi 220 V - 240 V veya

804 - 3011 Diz kontrol ünitesi 115 V

804 - 3002 Aynalı piyasemen Ø 2,35 mm



804 - 3152 **VARIOstar T50**
Ayak pedallı masa üstü ünitesi 220 V - 240 V

804 - 3151 **VARIOstar T50**
Ayak pedallı masaüstü ünitesi 115 V

İçerir:

804 - 3052 Masaüstü kontrol ünitesi 220 V - 240 V veya

804 - 3051 Masaüstü kontrol ünitesi 115 V

804 - 3002 Aynalı piyasemen Ø 2,35 mm 804 - 1016 Ayak pedalı



804 - 3162 **VARIOstar T50**
Tabletop unit
with Foot control lever left/right 220 V - 240 V

804 - 3161 **VARIOstar T50**
Tabletop unit
with Foot control lever left/right 115 V

İçerir:

804 - 3052 Masaüstü kontrol ünitesi 220 V - 240 V veya

804 - 3051 Masaüstü kontrol ünitesi 115 V

804 - 3002 Aynalı piyasemen Ø 2,35 mm 804 - 1015 Ayak kumanda kolu



804 - 3172 **VARIOstar T50**
Diz pedallı masaüstü ünitesi 220 V - 240 V

804 - 3171 **VARIOstar T50**
Diz pedallı masaüstü ünitesi 115 V

İçerir:

804 - 3052 Masaüstü kontrol ünitesi 220 V - 240 V veya

804 - 3051 Masaüstü kontrol ünitesi 115 V

804 - 3002 Aynalı piyasemen Ø 2,35 mm 804 - 1017 Diz pedalı (sola/sağa monte edilebilir)



804 - 1021

VARIOstar K50 için dijital hız göstergeli piyasemen standı



AV1000

Hazırlık Kutusu



Z1-M Series

Tekli vakum
üniteleri



Z1 Series

Tekli vakum
üniteleri



Z2

Çoklu vakum
ünitesi



Z4

Çoklu vakum
ünitesi



R 2000

Dikdörtgen Boru

R 2300

Uzatılabilir
Dikdörtgen Boru

R 2200

Emniyet camlı vakum
Hunisi






VARIOstar K50

Diz Kontrol Ünitesi ve El Aleti



800215 / 08-2022

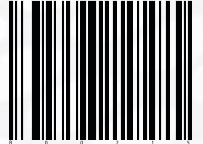

CE

Teknik veri:

Uzunluk:	162 mm
Ağırlık:	235 g
Nominal gerilim:	AC 100V/115V/230V/240V
Nominal frekans:	~ 50/60Hz
Hız:	1000-50000 rpm
Maşa	Ø 2.35 mm or optional Ø 3.00 mm
Tork:	7,8 Ncm
Güç tüketimi:	max. 270 W
Koruma sınıfı:	I

Varyantlar:	Diz kontrol ünitesi Diz pedallı masaüstü ünite Ayak pedallı masaüstü ünitesi Sol/sağ ayak kumandalı masaüstü ünitesi
Sağa dönüş/ Sola dönüş	Evet
Garanti:	Armatür ve sarımda ömür boyu garanti Diğer tüm parçalar 1 Yıl

teknik değişikliklere tabidir.

Tarafından dağıtıldı:



Zubler Gerätebau GmbH
Buchbrunnenweg 26
D - 89081 Ulm-Jungingen

Tel.: + 49 (0) 731 - 14 52 0
Fax: + 49 (0) 731 - 14 52 13
www.zubler.de